



ANLEITUNG

>>> Bitte keine Probennahme und keinen Versand an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen.

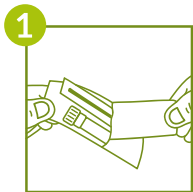


Hände gründlich waschen und Verpackung mit dem Abstrichröhrchen öffnen.

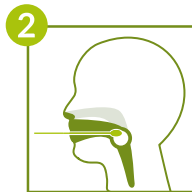

Vor einen Spiegel stellen. Abstrichtupfer am Stiel aus der Verpackung entnehmen. Mund weit öffnen und »A« sagen. Tupfer gezielt in den hinteren Halsbereich/Rachen führen, ohne Zähne, Mundschleimhaut oder Zunge zu berühren. Im Bogen zwischen den Mandeln die hintere Rachenwand mehrmals abstreichen, dabei das Zäpfchen nicht berühren.




Tupfer mit dem beflochtenen Ende voran in das Abstrichröhrchen stecken. Röhrchen festhalten und den Tupferstiel über der Röhrchenkante an der Sollbruchstelle vorsichtig abbrechen. Verschluss auf das Röhrchen setzen und zuschrauben.

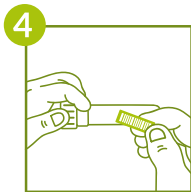

Längliches Barcode-Etikett in Längsrichtung auf das Röhrchen kleben.



Das beklebte Röhrchen mit der Probe in den Versandbehälter mit Saugeinlage einlegen und Versandbehälter zuschrauben.

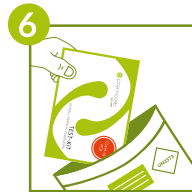

Den Laboreinsendeschein sorgfältig ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit dem Versandbehälter in den Versandkarton legen. Das vorfrankierte und voradressierte Rücksendetikett auf den Versandbeutel kleben. Den Versandkarton in den Versandbeutel stecken. Diesen verschließen und **am Tag der Probenentnahme bis 12 Uhr in einem DHL-Paketshop** abgeben.